
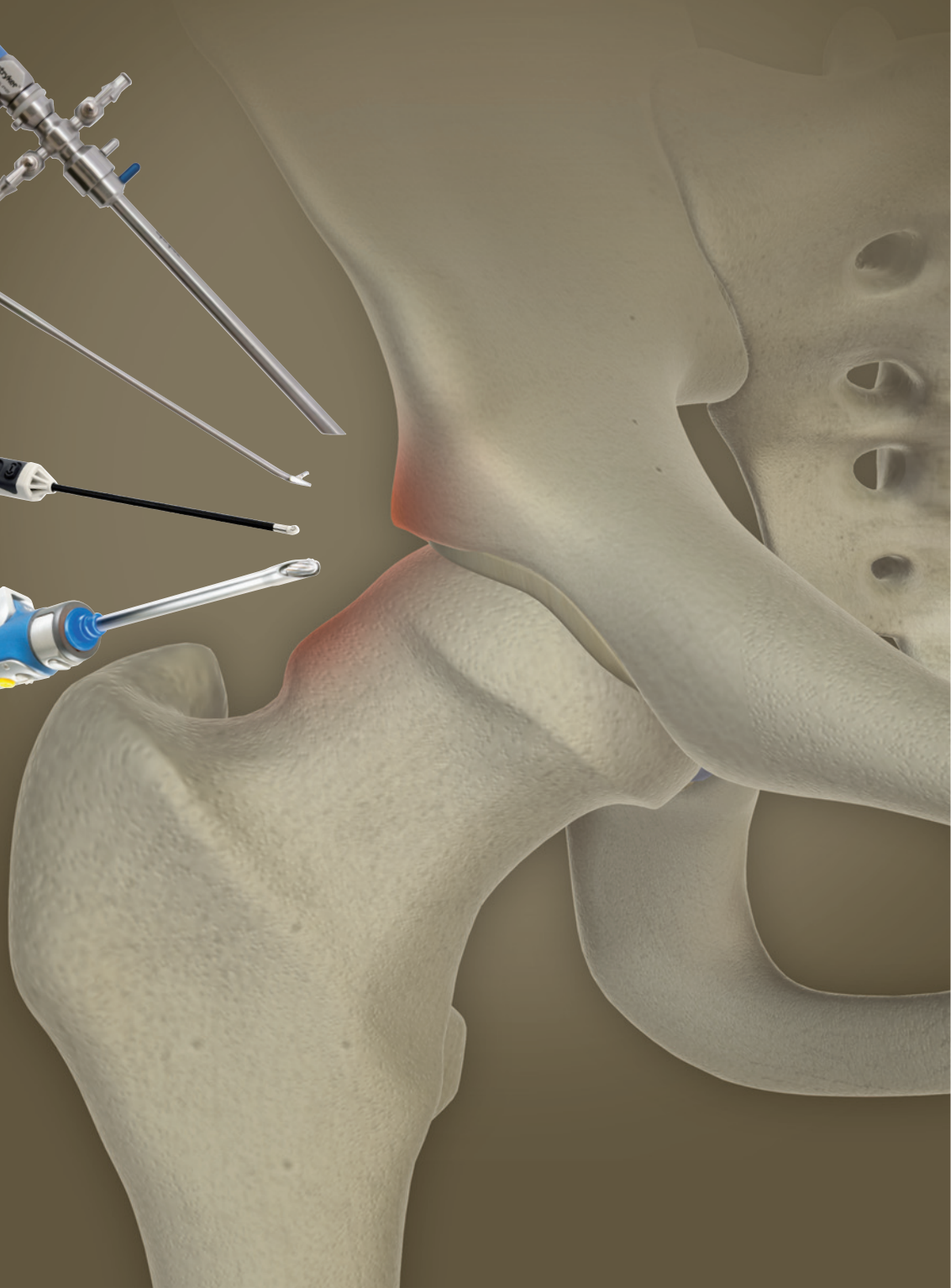


HIP ARTHROSCOPY

ヒップ アースロスコピー

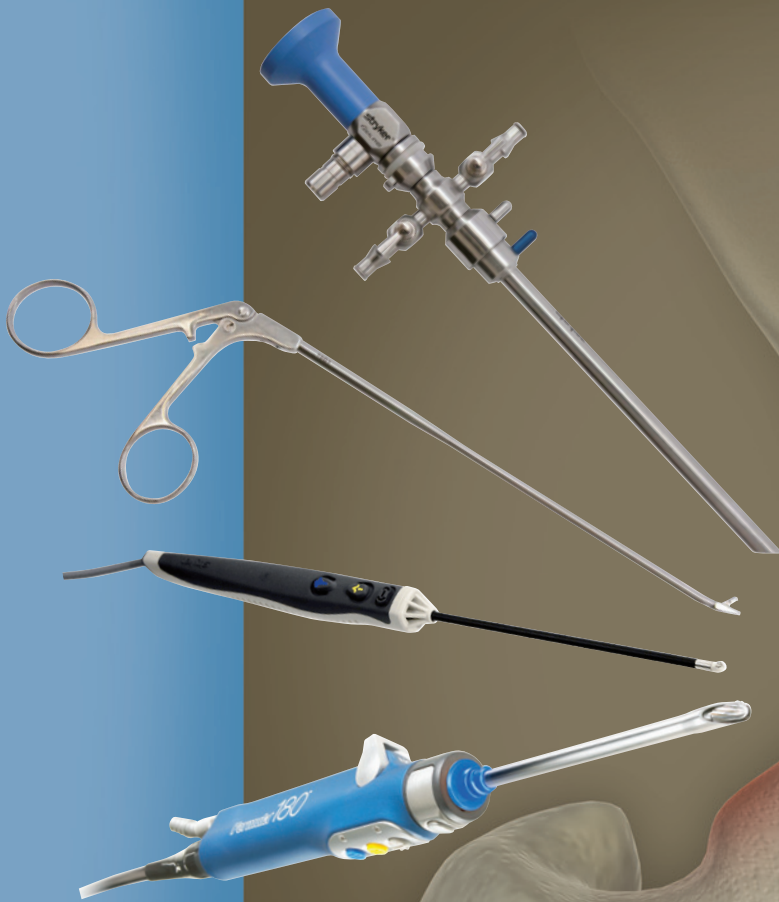

豊富な製品ラインアップとアトラumaticデザイン

stryker®

Tissue Preserving Hip Solutions

近年における股関節鏡視下手術手技の進展には目覚ましいものがあります。股関節鏡視下手術は、遊離体の摘出、軟部組織及び骨組織の切除、関節唇修復術や再建術といった様々な手術があります。ストライカーはそれらの股関節鏡視下手術が必要とする、股関節のアクセスから軟部組織の修復までトータルにサポートできる手術器械を、最新の技術を投入することで開発しました。

それぞれの手術器械は、患者の股関節のバイオメカニクスを最適に再建できるよう、軟部組織への侵襲度を最小限に止め、二次的損傷を防ぐように設計されています。また、術者の多様なニーズに応えられるよう、アクセスシステム及びインストルメントシステムで多様なラインアップを揃えました。

High-Definition Qualityの ビジュアルの追及

IDEAL EYES HD Arthroscopes

ストライカーのカメラシステムは常に最先端の技術を取り入れ、最高画質の映像を追及してきました。股関節鏡システムにも、ハイディフィニションカメラに対応可能なIDEAL EYESスコープを採用しております。IDEAL EYESスコープを採用することで、鏡視下映像の隅々にいたるまで、より周辺部の歪みが少なく、より明るく、より高精細な映像を再現します。

特徴

- ▶ 有効長165mm IDEAL EYESスコープ
- ▶ 4.0mm外径
- ▶ 30度、70度斜視鏡
- ▶ 2つの装着タイプ: アイピース&C-Mountデザイン
- ▶ 直感的なスピードロック方式



アイピースデザイン



C-Mountデザイン


ヒップ アースロスコピー インスツルメント

Hip Arthroscopy Instruments

あらゆる股関節鏡手術に対応できるよう豊富なインスツルメントを取り揃えております。それぞれのインスツルメントは、奥まった股関節にも対応できるよう190mmの有効長があります。




0242-200-006 ヒップバイター ストレート

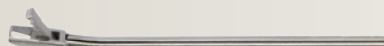


0242-200-007 ヒップバイター 15° アップ



0242-200-008 ヒップグラスパー 右

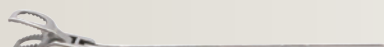

0242-200-009 ヒップグラスパー 左

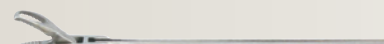

0242-200-010 ヒップグラスパー ストレート



0242-200-011 ヒップスーチャーパッサー 左



0242-200-012 ヒップスーチャーパッサー 右




0242-200-013 ヒップスーチャーパッサー ストレート



0242-200-014 ヒップスーチャーパッサー 35° アップ



0242-200-015 ヒップスーチャングラスパー

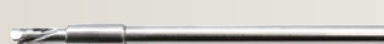

0242-200-016 ヒップスーチャーカッター



0242-200-017 ヒップノットプッシャー




0242-200-018 ヒップキュレット 20°




0242-200-019 ヒップラスプ 30° アップ



0242-200-020 ヒップリベレーター

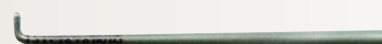

0242-200-021 ヒッププローブ 90°

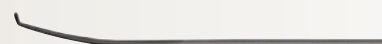

0242-200-022 ヒッププローブ 曲り



0242-200-023 ストレートマイクロフラクチャーピック



0242-200-024 ヒップブレード 曲り



0242-200-025 ヒップブレード ストレート ブラントチップ



0242-200-026 ヒップブレード ストレート シャープチップ



0242-200-027 スwitchingスティックハンドル




0242-200-003 カニュレイテッド スwitchingスティック 4.0mm

0242-200-004 カニュレイテッド スwitchingスティック 5.5mm

0242-200-005 カニュレイテッド スwitchingスティック 6.5mm



0242-000-112 ヒップ用インスツルメントトレイ

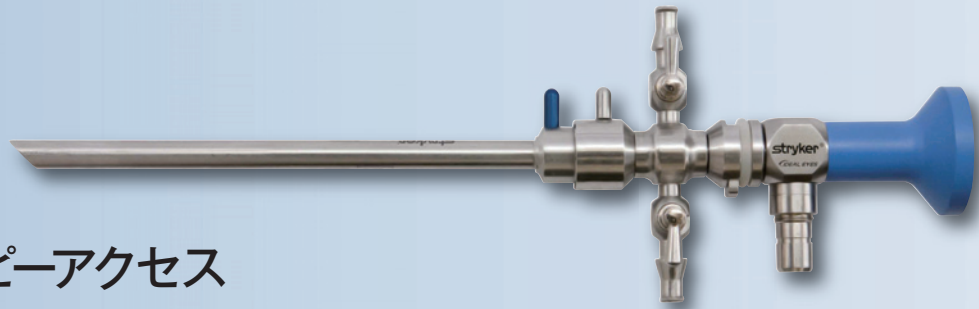

アースロスコピーアクセス

Arthroscopy Access

股関節は多くの軟部組織におおわれており、他の関節と比較してアクセスの難しい関節ですが、ストライカーの股関節鏡アクセスシステムは、固い股関節にもアクセスしやすいオブチュレーター形状を保ちつつ、アクセス時の二次的損傷を最小限に止められるようカニューラ先端は丸みをもった設計がされています。また術者の好みに合わせて、中空タイプのオブチュレーターのみならず、トロカール、そしてオプトロカールといったラインアップも揃えています。

特徴

- ▶ 4mm、5mm、5.5mm外径のカニューラ（ディスタルホールあり／なし）
- ▶ 3種類から選べる挿入器具：オブチュレーター、トロカール、オプトロカール
- ▶ シェーバーブレードが接続できるスクリューイン設計のカニューラ
- ▶ ポータル交換のしやすいJ-Lock機構のスコープブリッジ
- ▶ 4種類から選べるブリッジ：シングル、ダブル、ローテイティング、固定型
- ▶ 5.5mmと6.5mmの2種類のスロットカニューラ

0242-200-002

6.5mmスロットカニューレ

0242-200-001

5.5mmスロットカニューレ

0295-726-100

スクリュードライバーハンドル



0295-800-000

ヒップアクセス 滅菌トレー蓋

0295-800-200


ヒップアクセス ハードウェアXL トレイ

0295-800-300

ヒップアクセス 滅菌トレイ

Arthroscopy Access – Cannulas, Obturator, Obtrocar, Trocar

厚い軟部組織で覆われた固い股関節にも安全かつ容易にアプローチができるよう、カニューラシステムは非常に剛性の高いステンレス素材を使用しています。

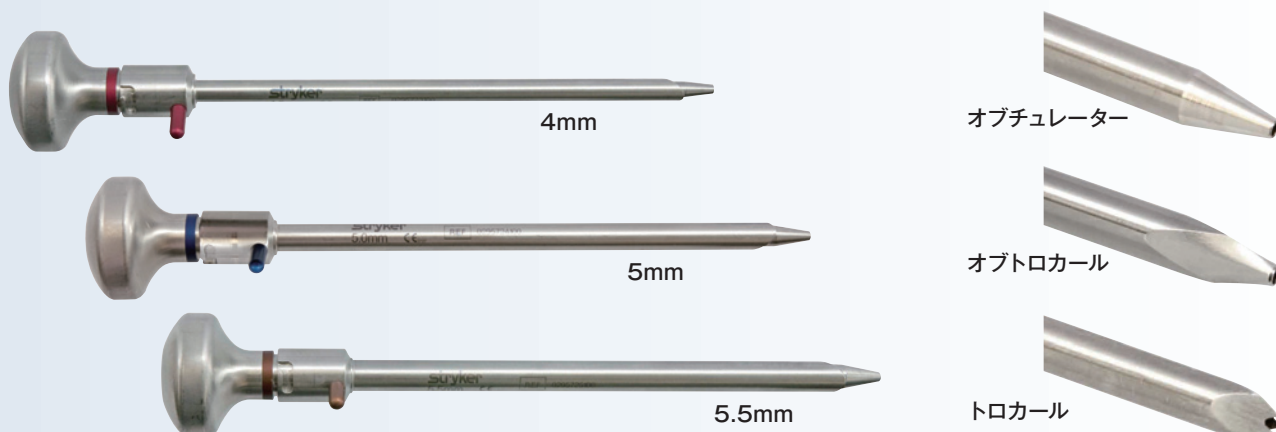


カニューラサイズ	カニューラタイプ (ディスタルホール無)	カニューラタイプ (ディスタルホール有)	オブチュレーター	オプトロカール	トロカール
■ 4.0mm	0295-723-100	0295-723-110	0295-723-120	0295-723-130	0295-723-140
■ 5.0mm	0295-724-100	0295-724-110	0295-724-120	0295-724-130	0295-724-140
■ 5.5mm	0295-725-100	0295-725-110	0295-725-120	0295-725-130	0295-725-140

Hip Bridges

ポータル間のスムーズなスコープのスイッチングを可能としながら、術中にブリッジが外れにくいJロック機構を採用しております。


Hip Bridges

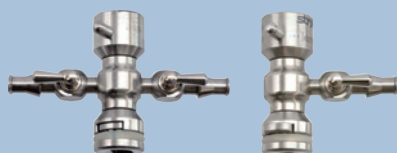

ヒップブリッジ

0295-727-200	デュアルローテティングストップコック
0295-727-100	シングルローテティングストップコック
0295-727-202	デュアル 固定型 ストップコック
0295-727-101	シングル 固定型 ストップコック

Hip Access Kit 構成内容例

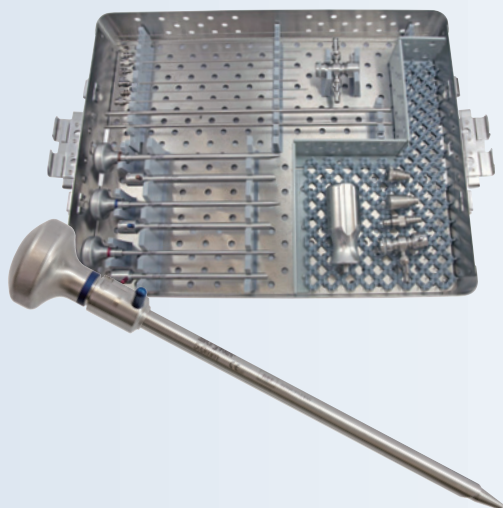

型 番	品 名	個数
0295-800-000	ヒップアクセス 滅菌トレー蓋	1
0295-800-200	ヒップアクセス ハードウェアXL トレイ	1
0295-800-300	ヒップアクセス 滅菌トレイ	1
0502-204-030	IDEAL EYES スコープ ロング ACロング 4mm 30° スピードロック	1
0502-204-070	IDEAL EYES スコープ ロング ACロング 4mm 70° スピードロック	1
0502-577-550	スピードロックカニューレ外径5.8mmロング ローテティングストップコック2付	1
0502-577-015	キャニュレテッドオブチュレーター-5.8mmロングペンシルチップ	1
0295-727-200	ヒップブリッジ デュアルローテティングストップコック	1
0295-723-100	ヒップ 4mmカニューラ	1
0295-724-100	ヒップ 5mmカニューラ	2
0295-725-100	ヒップ 5.5mmカニューラ	1
0295-723-120	ヒップ オブチュレーター 4mmカニューラ用	1
0295-724-120	ヒップ オブチュレーター 5mmカニューラ用	2
0295-725-120	ヒップ オブチュレーター 5.5mmカニューラ用	1
0295-726-100	スクリュードライバー ハンドル	1
0275-720-500	ニチノール ワイヤ (18G、3本入り、35.6cm有効長)	1
0275-720-300	ヒップ ニードル (15G、17.8cm有効長)	3

フォーミュラXLブレード

Formula XL Blades


Formulaブレードのラインアップに、新たに股関節鏡用のブレード先を加え、あらゆる股関節鏡視下手術に対応できるようにしました。XLブレードは、奥まった股関節にもアプローチしやすいよう有効長が180mmあり、アングルタイプのブレードも取り揃えております。アングルタイプのカッターは、切除効率を上げるため、カッター内部のシャフト部分を従来の金属コイルタイプから、パズルピースタイプに変更することで、刃の先端部にトルクが伝わりやすい構造になっています。



0385-544-000
アグレッシブプラスカッター 4.0mm径
0385-554-000
アグレッシブプラスカッター 5.0mm径



0385-545-000
トムキャットカッター 4.0mm径

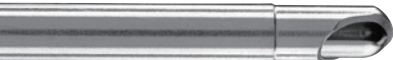

0385-552-000
リセクターカッター 5.0mm径



0385-943-000
8フルートベアバー 4.0mm径




0385-953-008
8フルートベアバー 5.5mm径



0385-950-008
8フルートラウンドバー 5.5mm径



0385-951-008
8フルートバレルバー 5.5mm径

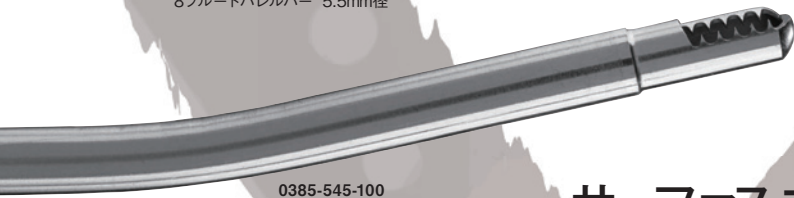

0385-545-100
トムキャットカッター 4.0mm径アングル

※0385-544-100
アグレッシブプラスカッター 4.0mm径
アングルロングヒップ
アングルカッターは2種類あります。



0279-351-103
90-S-XL サクション 径3.5mm



0279-351-253
50-S-XL サクション 径3.5mm



0279-350-502
フック型XL 径3.5mm

アングルカッター内部のシャフト部分は、レーザーカット加工により、パズルピース状になっております。



サーファスエナジーXLプローブ

SERFAS Energy XL Probes

Formula XLブレードと同様に、有効長が180mmあります。全部で3種類のプローブのラインアップを揃えており、フック型は関節包の切開に適しており、50-Sはシャフト先端部位が若干湾曲することで骨頭付近にもアプローチしやすくなっています。50-Sと90-Sはサクション付になっており、プローブ使用時に発生する股関節内の泡や熱を軽減します。



Arthroscopy Access - Cannulas

0295-723-100	ヒップ 4mmカニューラ
0295-723-110	ヒップ 4mmカニューラ ディスタルホール
0295-724-100	ヒップ 5mmカニューラ
0295-724-110	ヒップ 5mmカニューラ ディスタルホール
0295-725-100	ヒップ 5.5mmカニューラ
0295-725-110	ヒップ 5.5mmカニューラ ディスタルホール
0242-200-001	5.5mm スロットカニューレ
0242-200-002	6.5mm スロットカニューレ

Arthroscopy Access - Obturators

0295-723-120	ヒップ オブチュレーター 4mmカニューラ用
0295-723-140	ヒップ トロカール 4mm カニューラ用
0295-723-130	ヒップ オブトロカール 4mm カニューラ用
0295-724-120	ヒップ オブチュレーター 5mm カニューラ用
0295-724-140	ヒップ トロカール 5mm カニューラ用
0295-724-130	ヒップ オブトロカール 5mm カニューラ用
0295-725-120	ヒップ オブチュレーター 5.5mm カニューラ用
0295-725-140	ヒップ トロカール 5.5mm カニューラ用
0295-725-130	ヒップ オブトロカール 5.5mm カニューラ用
0295-726-100	スクリュードライバー ハンドル

Arthroscopy Access - Insertion Accessories

0275-720-300	ヒップ ニードル (15G、17.8cm有効長)
0275-720-500	ニチノール ワイヤー (18G、3本入り、35.6cm有効長)

Arthroscopy Access - Irrigation Accessories

0295-727-100	ヒップブリッジ シングルローテティングストップコック
0295-727-101	ヒップブリッジ シングル固定型ストップコック
0295-727-200	ヒップブリッジ デュアルローテティングストップコック
0295-727-202	ヒップブリッジ デュアル固定型ストップコック
OR-0266-721-100	ヒップ カニューラプラグ
OR-0266-725-000	シーリングキャップ
OR-0266-724-000	イリゲーションアダプター

Arthroscopy Access - Sterilization Tray

0295-800-000	ヒップアクセス 滅菌トレイ蓋
0295-800-200	ヒップアクセス ハードウェアXL トレイ
0295-800-300	ヒップアクセス 滅菌トレイ

Hip Arthroscopy Instruments

0242-000-112	ヒップ用インストルメントトレー
0242-200-003	カニューレイトッド スイッチングスティック 4.0mm
0242-200-004	カニューレイトッド スイッチングスティック 5.5mm
0242-200-005	カニューレイトッド スイッチングスティック 6.5mm
0242-200-006	ヒップバイター ストレート
0242-200-007	ヒップバイター 15° アップ
0242-200-008	ヒップグラスパー 右
0242-200-009	ヒップグラスパー 左
0242-200-010	ヒップグラスパー ストレート
0242-200-011	ヒップスーチャーパッサー 左
0242-200-012	ヒップスーチャーパッサー 右
0242-200-013	ヒップスーチャーパッサー ストレート
0242-200-014	ヒップスーチャーパッサー 35° アップ
0242-200-015	ヒップスーチャーグラスパー
0242-200-016	ヒップスーチャーカッター
0242-200-017	ヒップノットブッシャー
0242-200-018	ヒップキュレット 20°
0242-200-019	ヒップラスプ 30° アップ
0242-200-020	ヒップリベレーター
0242-200-021	ヒップブローブ 90°
0242-200-022	ヒップブローブ 曲り
0242-200-023	ストレートマイクロフラクチャーピック
0242-200-024	ヒップブレード 曲り
0242-200-025	ヒップブレード ストレート ブラントチップ
0242-200-026	ヒップブレード ストレート シャープチップ
0242-200-027	スイッチングスティックハンドル

Ideal Eyes Scopes & Hardware

0502-204-030 ¹⁾	IDEAL EYES スコープ ロング ACロング 4mm 30° スピードロック
0502-204-070 ¹⁾	IDEAL EYES スコープ ロング ACロング 4mm 70° スピードロック
0502-804-030 ²⁾	IDEAL EYES Cマウントスコープ AC4mm ロング 30° スピードロック
0502-804-070 ²⁾	IDEAL EYES Cマウントスコープ AC4mm ロング 70° スピードロック
0502-577-550	スピードロックカニューレ外径5.8mm ロングローテティングストップコック2付
0502-577-015	キャニューレイトッドオブチュレーター 5.8mm ロングペンシルチップ

Formula XL Blades

0385-544-000	フォーミュラ アグレッシブプラスカッター 径4.0mm ロングヒップ
0385-544-100	フォーミュラ アグレッシブプラスカッター 径4.0mm アングル ロングヒップ
0385-545-000	フォーミュラ トムキャットカッター 径4.0mm ロングヒップ
0385-545-100	フォーミュラ トムキャットカッター 径4.0mm アングルロングヒップ
0385-552-000	フォーミュラ XLリセクターカッター 5.0mm径
0385-554-000	フォーミュラ XLアグレッシブプラスカッター 5.0mm径
0385-943-000	フォーミュラ XL8フルートベアバー 4.0mm径
0385-950-008	フォーミュラ XL8フルートラウンドバー 5.5mm径
0385-951-008	フォーミュラ XL8フルートバレルバー 5.5mm径
0385-953-008	フォーミュラ XL8フルートベアバー 5.5mm径

SerfasEnergy XL Probes

0279-351-103 ³⁾	サーファスエナジーブローブ 90-S XL サクション 径3.5mm
0279-351-253 ³⁾	サーファスエナジーブローブ 50-S XL サクション 径3.5mm
0279-350-502 ³⁾	サーファスエナジーブローブ フック型 XL 径3.5mm

医療機器承認番号	販売名
1) 223AFBZX00048000	ハイディフィニションスコープ
2) 219ABBZX00161000	Stryker アースロスコープ
3) 223AFBZX00004000	ストライカー サーファス エナジー

Reconstructive

Hips
Knees
Trauma & Extremities
Foot & Ankle
Joint Preservation
Orthobiologics & Biosurgery

MedSurg

Power Tools & Surgical Accessories
Computer Assisted Surgery
Endoscopic Surgical Solutions
Integrated Communications
Beds, Stretchers & EMS
Reprocessing & Remanufacturing

Neurotechnology & Spine

Craniomaxillofacial
Interventional Spine
Neurosurgical, Spine & ENT
Neurovascular
Spinal Implants

日本ストライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 tel: 03-6894-0000

www.stryker.co.jp

・医療従事者向けサイト-Stryker Medical Professional Site
www.stryker.co.jp/medical.html

この印刷物はストライカーの製品を掲載しています。全てのストライカー製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載の仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、ストライカー・グループの登録商標です。

Literature Number: ED1-96
NH/JP 0m 06/13

Copyright© 2013 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者
日本ストライカー株式会社
550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1